



Dometic Medikamentenkühlschränke

Lautlose Absorberkühlung oder leistungsstarke Kompressortechnik

Die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C. Mit Hilfe der Fächeraufteilung können die Arzneimittel übersichtlich geordnet und gruppiert werden. Ein digitales Thermometer kontrolliert die Innentemperatur und speichert die jeweils höchste und niedrigste Temperatur im definierten Kontrollzeitraum.

Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Kühltechniken und Ausstattungen:

- DS-Serie mit lautloser Absorberkühlung: für normale Umgebungstemperaturen, Ausstattung mit externem Thermometer und Kunststoffschubladen (1/2-Auszug); Türanschlag wechselbar
- HC-Serie mit leistungsstarker, energieeffizienter Kompressortechnik: Ausstattung mit integriertem Temperatur-Display und hochwertigen, rollengelagerten Metallschubladen mit Kunststofffront und 3/4-Auszug

Anwendungen:

Apotheken, Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegestationen, Labors, Altenheime

Produktvorteile

- Innenlüfter für konstantes, gleichmäßiges Temperaturniveau (2 – 8 °C) und optimale Luftzirkulation (manuelle Abtauung nahezu unnötig)
- Digitalthermometer mit Min-/Max-Wertspeicher zur Dokumentation des Temperaturverlaufs
- Automatischer Türalarm: akustisches Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt
- LED-Innenbeleuchtung
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- Hohe Schubladenfronten: Schutz vor Wärmeeintritt bei geöffneter Tür



HC-Serie: rollengelagerte Metallschubladen mit Kunststofffront und 3/4-Auszug



DS-Serie: herausnehmbare Kunststoffschubladen mit transparenter Front und 1/2-Auszug; Türanschlag wechselbar

KS Medizintechnik
seit 1921

Karhäuser Straße 21
34587 Felsberg

Kostenlose Servicehotline
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Medikamentenkühlschränke

Die Geräte im Vergleich



Modell	DS 301 H	DS 601 H	HC 302	HC 502
Bruttovolumen (Liter)	27	53	33	49
Nettovolumen (Liter)	23	51	29	43
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Kühltechnik	Absorber	Absorber	Kompressor	Kompressor
Temperaturbereich (nicht einstellbar)	2–8 °C	2–8 °C	2–8 °C	2–8 °C
Abmessungen (H x B x T, in mm)	580 x 422 x 393	592 x 486 x 494	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,86	1,05	0,42	0,44
Schubladen (Anzahl)	3	3	3	3
Türschloss	•	•	•	•
Digitalthermometer mit Wertspeicher	extern	extern	intern	intern
Türanschlag wechselbar	ja	ja	nein	nein
LED-Innenbeleuchtung Farbe Weiß	ja	ja	ja	ja

Modellübersicht Medikamentenkühlschränke

Ausstattungsmerkmale im Vergleich

DS 301 H / DS 601 H Absorberkühlung

- Lautlose Absorberkühlung für normale Umgebungstemperaturen
- Externes Thermometer mit Min-/Max-Wertspeicher
- Kunststoffschubladen mit 1/2-Auszug und hoher, transparenter Front
- Türanschlag wechselbar
- Einbaufähig (Schleppscharnier nicht möglich)

HC 302/ HC 502 Kompressorkühlung

- Leistungsstarke Kompressorkühlung – Sicherheit bei hohen Umgebungstemperaturen, extrem sparsamer Energieverbrauch
- In die Tür integriertes, beleuchtetes Thermometer mit Min-/Max-Wertspeicher
- Hochwertige, rollengelagerte Metall-Schubladen mit 3/4-Auszug zur besonders übersichtlichen Lagerung
- Einbaufähig (Schleppscharnier nicht möglich)

Lautlose Absorberkühlschränke

Ideal für Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen


In den lautlos arbeitenden Absorberkühlschränken der DS-Serie sind Medikamente, Impfstoffe & Co. sicher verwahrt. Im Innenraum herrscht eine konstante, gleichmäßige Temperatur, die von einem externen Thermometer überwacht wird. Praktische Schubladen mit hoher, transparenter Front sorgen für ein komfortables Handling und minimale Kälteverluste beim Öffnen.

Qualitätsmerkmale Externes Thermometer mit Min-/Max-Wertspeicher, Kunststoffschubladen mit 1/2-Auszug und hoher, transparenter Front, LED-Innenbeleuchtung, Türschloss, Türanschlag wechselbar, einbaufähig (Schleppscharnier nicht möglich)

Dometic DS 301 H

Absorberkühlschrank

6.51

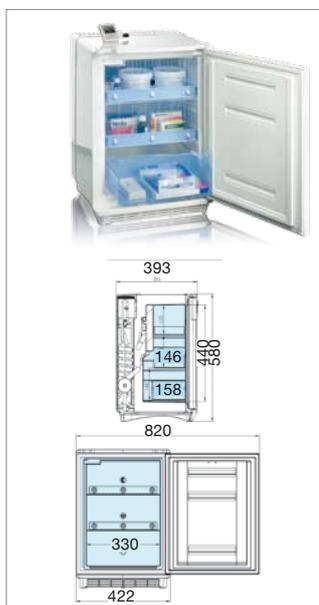

Bruttoinhalt	ca. 27 Liter
Anschlussspannung	230 Volt
Mittlere Leistungsaufnahme	65 Watt
Temperaturbereich	+2 °C bis +8 °C (nicht einstellbar)
Isolierung	PU-Vollausschäumung
System	Lautlose Absorberkühlung für normale Innenraumtemperaturen
Material	Vollverkleidetes Kunststoffgehäuse mit Rückwandabdeckung
Farbe	Gehäuse: weiß; Tür: weiß
Gewicht	ca. 15 kg
Außenabmessung (H x B x T)	580 x 422 x 393 mm
Qualitätsmerkmale	Externes Thermometer mit Min./Max., Wertspeicher zur Überwachung der Innenraumtemperatur, integrierfähig (nicht mit Schleppscharnier), Schubladen aus Kunststoff mit 1/2 Auszug, LED-Innenbeleuchtung, Türschloss, wechselbarer Türanschlag
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)




+2 °C bis +8 °C
(Festpunkttemperatur +5 °C,
±3 °C Schwankung)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic DS 301 H	9105203202

Dometic DS 601 H

Absorberkühlschrank

6.51

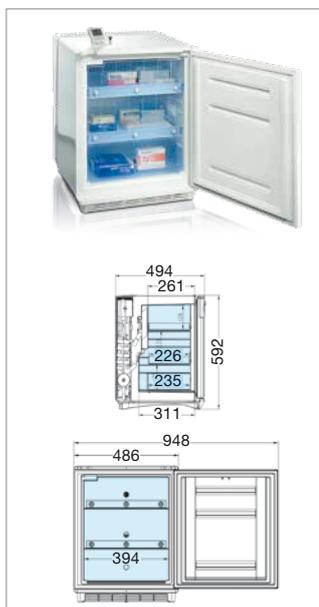

Bruttoinhalt	ca. 53 Liter
Anschlussspannung	230 Volt
Mittlere Leistungsaufnahme	85 Watt
Temperaturbereich	+2 °C bis +8 °C (nicht einstellbar)
Isolierung	PU-Vollausschäumung
System	Lautlose Absorberkühlung für normale Innenraumtemperaturen
Material	Vollverkleidetes Kunststoffgehäuse mit Rückwandabdeckung
Farbe	Gehäuse: weiß; Tür: weiß
Gewicht	ca. 20 kg
Außenabmessung (H x B x T)	592 x 486 x 494 mm
Qualitätsmerkmale	Externes Thermometer mit Min./Max., Wertspeicher zur Überwachung der Innenraumtemperatur, integrierfähig (nicht mit Schleppscharnier), Schubladen aus Kunststoff mit 1/2 Auszug, LED-Innenbeleuchtung, Türschloss
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)



+2 °C bis +8 °C
(Festpunkttemperatur +5 °C,
±3 °C Schwankung)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic DS 601 H	9105203213

Kraftvolle, energieeffiziente Kompressor-Kühlschränke

Zuverlässig auch bei hohen Umgebungstemperaturen

Sollen Medikamenten auch bei hohen Umgebungstemperaturen sicher gelagert werden, empfiehlt sich ein Kühlschrank mit leistungsstarker Kompressortechnik. Die Geräte der HC-Serie sind mit einer integrierten, beleuchteten Temperatur-Anzeige ausgestattet. Hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen, die sich bis auf 3/4 ihrer Tiefe ausziehen lassen, gewährleisten eine übersichtliche Lagerung.

Qualitätsmerkmale Integriertes Thermometer mit Min-/Max-Wertspeicher, beleuchtete Temperaturanzeige, hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug und Kunststofffront, LED-Innenbeleuchtung, Türschloss, einbaufähig (Schleppcharnier nicht möglich)

Dometic HC 302

Kompressorkühlschrank

6.63



Bruttoinhalt	ca. 33 Liter
Anschlussspannung	230 Volt
Mittlere Leistungsaufnahme	40 Watt
Temperaturbereich	+2 °C bis +8 °C (nicht einstellbar)
Isolierung	PU-Vollausschäumung
System	Leistungsstarke Kompressorkühlung – auch bei hohen Umgebungstemperaturen
Material	Vollverkleidetes Kunststoffgehäuse mit Rückwandabdeckung
Farbe	Gehäuse: weiß; Tür: weiß
Gewicht	ca. 17 kg
Außenabmessung (H x B x T)	580 x 422 x 450 mm
Qualitätsmerkmale	Integriertes Thermometer mit Min-/Max-Wertspeicher, beleuchtete Temperaturanzeige, hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug und Kunststofffront, LED-Innenbeleuchtung, Türschloss
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)



+2 °C bis +8 °C
(Festpunkttemperatur +5 °C,
±3 °C Schwankung)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic HC 302	9105204209

Dometic HC 502

Kompressorkühlschrank

6.63



Bruttoinhalt	ca. 49 Liter
Anschlussspannung	230 Volt
Mittlere Leistungsaufnahme	40 Watt
Temperaturbereich	+2 °C bis +8 °C (nicht einstellbar)
Isolierung	PU-Vollausschäumung
System	leistungsstarke Kompressorkühlung – auch bei hohen Umgebungstemperaturen
Material	Vollverkleidetes Kunststoffgehäuse mit Rückwandabdeckung
Farbe	Gehäuse: weiß; Tür: weiß
Gewicht	ca. 21 kg
Außenabmessung (H x B x T)	592 x 486 x 494 mm
Qualitätsmerkmale	Integriertes Thermometer mit Min-/Max-Wertspeicher, beleuchtete Temperaturanzeige, hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug und Kunststofffront, LED-Innenbeleuchtung, Türschloss
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)



+2 °C bis +8 °C
(Festpunkttemperatur +5 °C,
±3 °C Schwankung)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic HC 502	9105204215