


Serie DX1

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

- Modell 1000-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 1000-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 1000-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

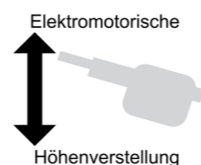

Modell 1000-00E in Grundausstattung, mit Handschalter anstelle von Fußschalter; Polsterfarbe: 64-717 deep sea



KS Medizintechnik
 Telefon: 0800 - 10 10 871
HIER GÜNSTIG KAUFEN
 www.ksmedizintechnik.de

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
 - Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
 - Fußteil fest
 - Fußteillänge: 1.400 mm
 - Polsterteilstärke: 65 mm



Modell 1000-04E mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), Papierrollenhalter (010F); Polsterfarbe: 64-173 smaragd


Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
 - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

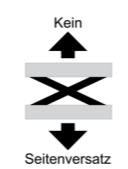

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
 Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
 Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
 Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
 Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
 1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E
 1 Fußschalter



Art.-Nr. 092E
 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Weitere Sicherheitselemente



Art.-Nr. B1997E
 Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet



Art.-Nr. 094E
 Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben, Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 096E
 Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben, Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
 Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm




Art.-Nr. 010F / 015F
 Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Kopfteiloptionen

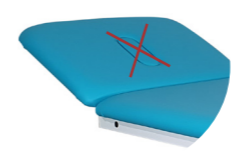

Art.-Nr. 1615-EF
 Entfall Nasenschlitz



Art.-Nr. 056
 Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K / 015K nicht möglich

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008
 1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
 Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
 Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm