

Serie DX1


2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1030-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1030-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1030-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

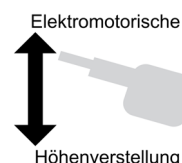

NEU



Beide Abb.:
Modell 1030-04E mit
Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren
Comfort-Doppelrollen (040N);
Polsterfarbe: 64-703 pearl

KS **Medizintechnik**
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in Design-Halbrund-Form
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm, ohne Nasenschlitz
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 520 mm bis 960 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
Kopfteil belastbar bis 90 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

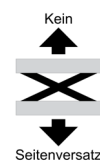

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 092E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Weitere Sicherheitselemente



Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010K/F / 015K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm