


# Serie DX1

## 3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

- Modell 1050-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 1050-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 1050-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

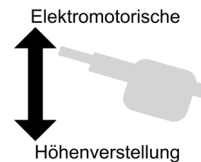

Beide Abb.:  
Modell 1050-00E  
mit Ausstattungsoptionen:  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit  
Zentralfeststellsystem (046),  
Entfall Nasenschlitz (1615-EF);  
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

**KS Medizintechnik**  
Telefon: 0800 - 10 10 871  
**HIER GÜNSTIG KAUFEN**  
www.ksmedizintechnik.de

### Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar
- Fußteillänge: 920 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



### Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 940 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

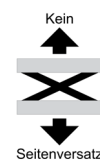

## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N  
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E  
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E  
1 Fußschalter



Art.-Nr. 092E  
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E  
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:  
Stange drücken = Liege fährt nach oben  
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 096E  
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:  
Stange drücken = Liege fährt nach oben  
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. B1997E  
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

### Weitere Sicherheitselemente

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm




Art.-Nr. 010K/F / 015K/F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176  
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Kopfteiloptionen

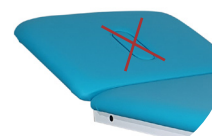

Art.-Nr. 1615-EF  
Entfall Nasenschlitz



Art.-Nr. 056  
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K / 015K nicht möglich

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 007: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

### Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008  
1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

